

Виртуальная клиника

Личный кабинет администратора

Инструкция по работе в системе

Виртуальная клиника (далее - сервис) это система обмена данными между пациентом и врачом через цифровые каналы связи (сети операторов мобильной связи) или сеть Интернет.

Виртуальная клиника позволяет врачу вести удаленный мониторинг обследований, проведенных самостоятельно пациентами при помощи «Комплекса аппаратно-программного для скрининга сердца «КардиРу», ТУ 9442-038-17635079-2012, регистрационное удостоверение №РЗН 2013/778 от 28 июня 2013 г. (далее – изделие), контролировать динамику состояния сердца пациентов и выработать рекомендаций по результатам обследований.

В данном документе описан порядок работы с личным кабинетом администратора виртуальной клиники (далее ЛК). Администратор контролирует в ЛК переданные устройства пациентам в клинику и привязку устройств к пациентам клиники.

До начала работы рекомендуется ознакомиться с документацией:

- МКС.КС000001-64-РЭ КардиРу Руководство по эксплуатации
- МКС.КС000001-61 КардиРу Руководство по анализу

Пожалуйста, сообщите нам о любых проблемах, с которыми пришлось столкнуться при использовании сервиса. Мы будем благодарны за любые замечания и предложения по его улучшению.

Контактная информация

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

САЙТ:

Производитель оставляет за собой право вносить уточнения и изменения в этот документ без предварительного уведомления для улучшения изделия. Опечатки, имеющиеся в этом документе, будут исправлены в последующих изданиях.

Вход в Личный кабинет администратора

Личный кабинет администратора доступен в любом браузере по адресу: www.kardi.ru.

Корректная работа личного кабинета гарантируется в следующих браузерах:

- Internet Explorer (не ниже 7 версии);
- Google Chrome (не ниже версии);
- Mozilla Firefox (не ниже версии).

После загрузки сайта Kardi.Ru нажмите на кнопку «**Мой кабинет**»



Рисунок 1. Главная страница сайта Kardi.Ru и кнопка «Мой кабинет».

В появившемся окне «**Авторизация/Регистрация**» (Рис. 2) введите в поле «**E-mail**» имеющийся у администратора логин, а в поле «**Пароль**» - пароль и нажмите кнопку «**Войти**».


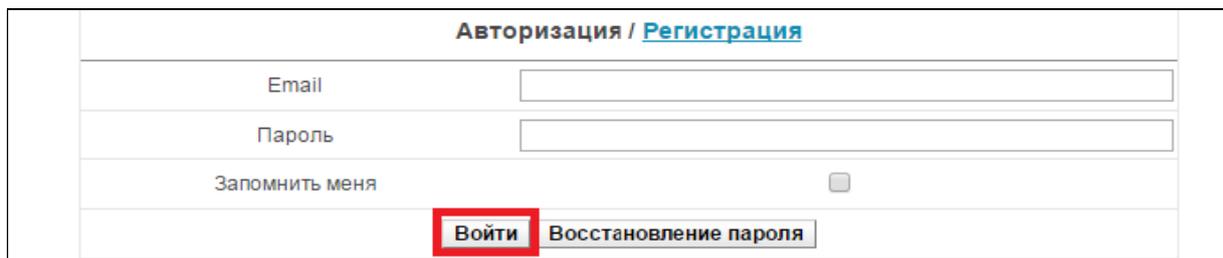


Рисунок 2. Окно «Авторизация/Регистрация».

Примечание: Логин вводится английскими буквами, а пароль английскими буквами и цифрами.

Регистрацию в системе врача осуществляет администратор.

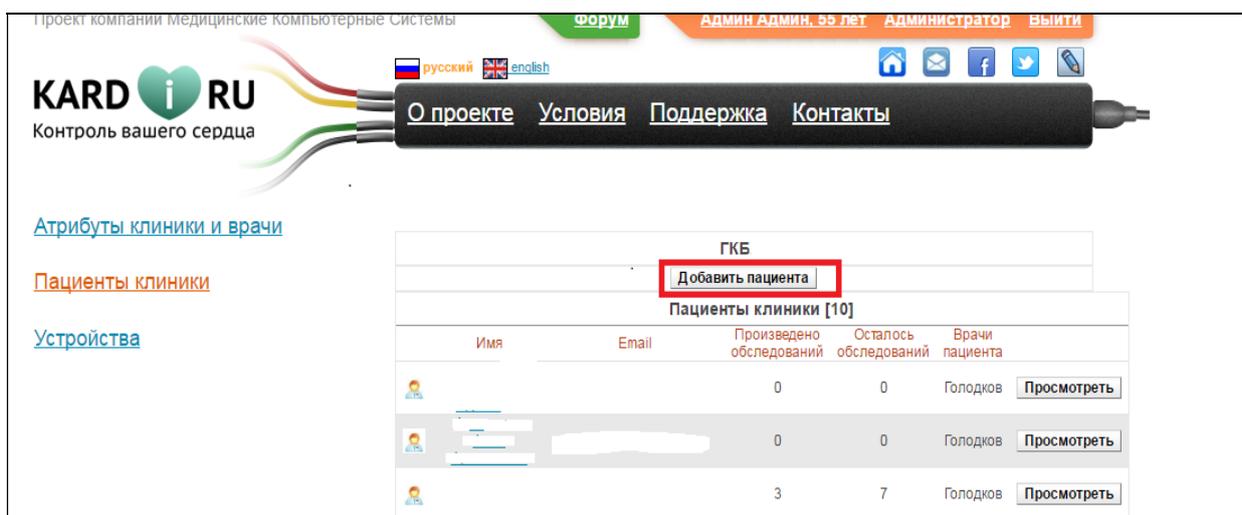

Имя	Email	Произведено обследований	Осталось обследований	Врачи пациента
[Redacted]	[Redacted]	0	0	Голодков
[Redacted]	[Redacted]	0	0	Голодков
[Redacted]	[Redacted]	3	7	Голодков

Рисунок 3. Окно «Личный кабинет администратора».

Личный кабинет администратора

Личный кабинет администратора обеспечивает следующий функционал:

- Ввод и редактирование личных - данных врачей, прикрепления/открепление пациентов от наблюдения врача - кнопка «Атрибуты клиники и врача»
- Просмотр общего списка пациентов с проведенными обследованиями - кнопка «Пациенты клиники».
- Просмотр данных о переданных устройствах в клинику – кнопка «Устройства».

Окно «Пациенты клиники».

После выполнения операции «Авторизация» администратору открывается в Личном кабинете страница «Пациенты клиники» (Рис.3). Список содержит контактную информацию о данных пациентах (E-mail, телефон, дату рождения).

Администратор может добавить пациента в данном медицинском учреждении - нажав на кнопку «Добавить пациента» к данному медицинскому учреждению, которое отображается в верхней строке списка, открывается окно «Добавление пациента» (Рис.4).

Добавление пациента	
Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.	
Фамилия	<input type="text"/>
Имя	<input type="text"/>
Отчество	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Логин (для форума)	<input type="text"/>
Пароль, от 8-ми до 32-х символов * Данный пароль необходим для входа в личный кабинет и на форум	<input type="password"/>
Пароль ещё раз *	<input type="password"/>
Дата рождения *	<input type="text"/> (ДД-ММ-ГГГГ)
Пол	<input type="text" value="мужской"/>
Страна	<input type="text" value="РОССИЯ"/>
Город	<input type="text" value="Москва"/>
Контактный мобильный телефон (Пример: 79031234567) *	<input type="text"/>
Осталось обследований	<input type="text"/>
Врачи	<input type="checkbox"/> Василий
<input type="button" value="Создать"/> <input type="button" value="Назад"/>	

Рисунок 4 Окно «Добавление пациента»

В данном окне администратор вводит все необходимые данные о новом пациенте и заполняет поля «*» обязательные для заполнения.

Администратор выбирает врача, к которому будет прикреплен пациент и при необходимости ограничения количества обследований внести данные в графу «Осталось обследований». Добавление пациента осуществляется кнопкой «Создать». Возврат из окна по кнопке – «Назад»

При нажатии на кнопку «Просмотреть» администратор имеет возможность просмотреть проведенные пациентом обследования (Рис. 5).

В окне «Данные о пациенте» администратор может в разделе «Редактирование пациента» изменить его данные или заблокировать, соответственно кнопками

«Изменить данные» и «Блокировать». Выход из окна осуществляется кнопкой «Назад».

Примечание.

Кнопки «Динамика» и «Галерея портретов» в данном окне не активны. Администратор может просмотреть по выбранному из списка обследованию «Общее Заключение» об обследовании, Динамику, по выбранным временным интервалам, Галерею портретов и ЭКГ.

Дата	Миокард, %	Ритм, %	Пульс, уд/мин	Комментарий
22.04.2016 11:44	37	83	121	Просмотреть
20.04.2016 18:49	15	36	94	Просмотреть
20.04.2016 14:44	15	16	82	Просмотреть
11.04.2016 06:32	17	70	52	Просмотреть

Рисунок 5 Окно «Данные о пациенте»

Окно «Атрибуты клиники и врача».

В главном меню администратора при нажатии на кнопку «Атрибуты клиники и врача» отражается окно добавления врача и просмотр его данных с привязкой пациентов (Рис. 6).

В данном окне администратор имеет возможность добавить врача в ЛК кнопкой «Добавить врача» и просмотреть его данные и с данными привязанных к нему на обслуживание пациентов.



Рисунок 6 Окно «Атрибуты врача»

При нажатии на кнопку «Добавить врача» администратор в открывшемся окне «Данные врача» (Рис. 7) в поле «Добавление врача» заполняет все данные о враче, а также поля «*» для обязательного заполнения.

Возможность отражения на главной странице личные данные с номером телефона и E-mail врача осуществляется администратором установкой флагов:

- «Показать на главной странице сайта»
- «Показать номер телефона»
- «Показать и E-mail »

Возможность получения врачом SMS оповещений и E-mail сообщений осуществляется администратором установкой флагов:

- «SMS оповещение разрешено»
- «SMS оповещение при каждом исследовании»
- «E-mail оповещение разрешено»
- «E-mail оповещение при каждом исследовании»

При отсутствии выставленных администратором флагов SMS и E-mail – оповещений они не будут поступать врачу - режим отключены.

Если SMS и E-mail оповещения разрешены – установкой соответствующих флагов администратором – то сообщения будут приходить по требованию пациента.

Если SMS оповещения и E-mail сообщения разрешены при каждом исследовании – установкой соответствующих флагов – то сообщения будут приходить после каждого исследования пациента.

Предусмотрен режим «Абонентская плата в месяц», – который настраивается при интеграции с платежной системой – установкой флага «Абонентская плата в месяц» и позволяет списывать с пациента денежные средства.

Предусмотрен режим «Стоимости консультаций» –который настраивается при установке флага «Стоимость консультаций», позволяющий также списывать с пациента денежные средства при нажатии пациентом кнопки «Отправить обследование врачу». Выход из окна «Данные врача» осуществляется кнопкой – «Назад».

Добавление врача

Фамилия

Имя

Отчество

Email

Логин (для форума)

Пароль, от 8-ми до 32-х символов *
Данный пароль необходим для входа в личный кабинет и на форум

Пароль ещё раз *

Дата рождения * (ДД-ММ-ГГГГ)

Пол: Мужской

Показывать на главной странице сайта

Показывать номер телефона

Показывать Email

Детальное описание рогадий

SMS оповещение разрешено

SMS оповещение при каждом исследовании

E-mail оповещение разрешено

E-mail оповещение при каждом исследовании

Врач может менять владельцев устройства

Страна: Россия

Город: Москва

Контактный мобильный телефон (Пример: 79031234567) *

Абонентская плата в месяц

Стоимость консультации

Создать Назад

Рисунок 7 Окно «Данные врача»

При нажатии на кнопку «Просмотреть» в окне «Атрибуты врача» администратор открывает окно «Редактирование данных врача и пациентов» с данными врача, установленными оповещениями и списком привязанных к врачу пациентов (Рис. 8).

Редактирование врача



Фамилия	
Имя	
Отчество	
Email	@mail.ru
Контактный мобильный телефон (Пример: 79031234567) *	79
Абонентская плата в месяц	0.0
Стоимость консультации	0.0
Показывать на главной странице сайта	<input checked="" type="checkbox"/>
Показывать номер телефона	<input type="checkbox"/>
Показывать Email	<input type="checkbox"/>

Детальное описание регалий

Источник

Стиль

Шрифт

SMS оповещение разрешено	<input checked="" type="checkbox"/>
SMS оповещение при каждом исследовании	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail оповещение разрешено	<input type="checkbox"/>
E-mail оповещение при каждом исследовании	<input type="checkbox"/>
Врач может менять владельцев устройства	<input type="checkbox"/>

Изменить данные
Изменить фотографию
Блокировать
Назад

Пациенты клиники [11]

	Имя	Email	Дата рождения	Регион
	Фамилия Имя Отчество	E-mail	03.03.1961	Москва
	Фамилия Имя Отчество	E-mail	19.02.1937	Москва
	Фамилия Имя Отчество	E-mail	11.05.1955	Москва

Отвязать отмеченных пациентов от врача
Добавить пациентов к врачу

Рисунок 8 Окно «Редактирование данных врача и пациентов».

Администратор в данном окне «Редактирование врача и пациентов» имеет возможность изменить личные данные врача, SMS и E-Mail оповещения и владельца устройства – выставив соответствующие флаги.

Изменение данных и фотографии осуществляется кнопками «Изменить данные» и кнопкой «Изменить фотографию», возможно кнопкой «Блокировать»-заблокировать данного врача в системе.

В данном окне администратор имеет возможность:

- отвязать пациента от врача – выставлением флага напротив данных пациента в списке пациентов и нажимает кнопку «Отвязать отмеченных пациентов от врача»
- добавить пациента врачу из общего списка пациентов кнопкой «Добавить пациента врачу», отображается список пациентов для добавления (Рис. 9) в окне «Привязка пациентов к врачу»

Из списка пациентов выбираем пациентов для привязки к врачу. Возврат из окна пациентов осуществляется кнопкой «Назад».

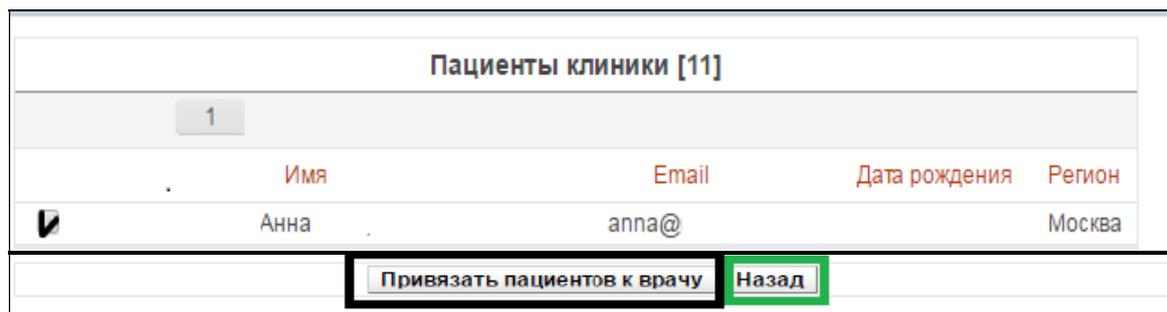


Рисунок 9 Окно «Привязка пациентов врачу».

Окно «Устройства»

В данном окне администратор имеет возможность выбора устройства по модели и серийному номеру устройства введя данные в соответствующие поля и нажать на кнопку «Показать» (Рис. 10).

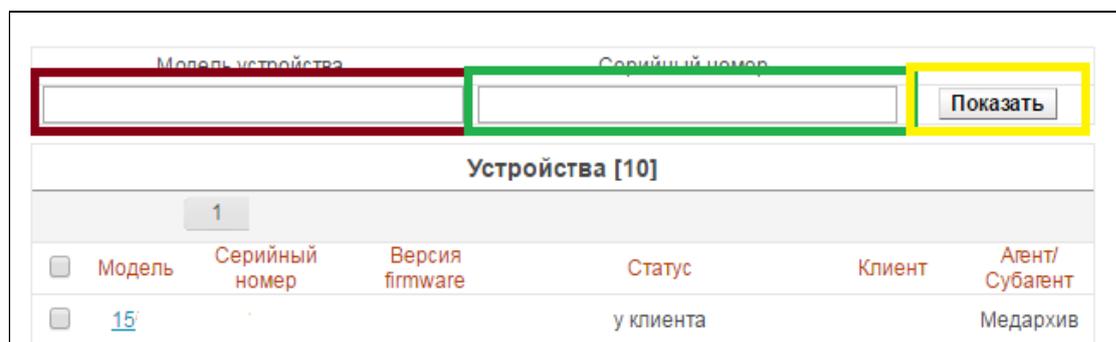


Рисунок 10 Окно «Выбор устройства».

При вводе модели и номера устройства одновременно администратор может передать устройство другому пациенту выбрав его из списка клиентов и сохранить изменения –нажав на кнопку «Сохранить» (Рис. 11).

Модель устройства	Серийный номер	
15	0	Показать
Информация об устройстве		
Модель	15	
Серийный номер	0	
Баланс	0.0	
Версия firmware		
Дата создания	31.08.2015	
Дата изменения	06.07.2016	
Комментарий		
Номер карты		
Проверено техником	<input checked="" type="checkbox"/>	
Статус	передан на клинические испытания	
Обновить Firmware до версии	0.0	
Клиент	Алла	
Сохранить	Назад	

Рисунок 11 Окно «Передача прибора».

Выход из Личного Кабинета

Выход из ЛК администратора осуществляется нажатием на кнопку «Выход» (Рис. 12) на странице Личного кабинета администратора.

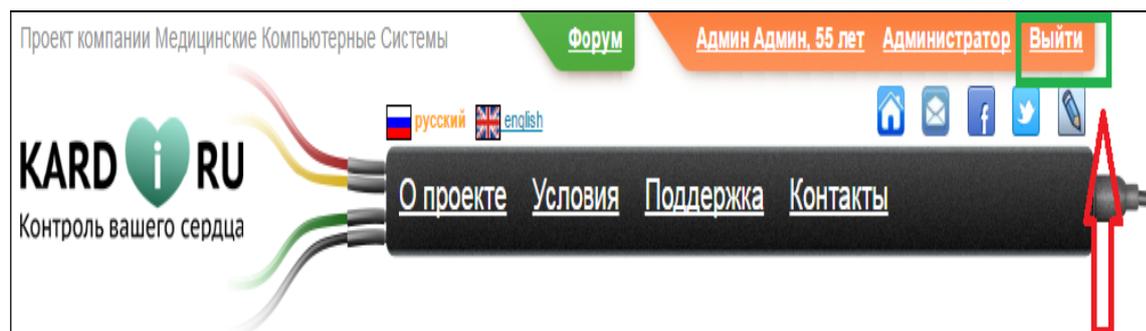


Рисунок 12 «Выход»

Заключение

Данная инструкция предназначена для осуществления функционала администратора «Виртуальной клиники» в медицинском учреждении.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.